

Split-Schleuse NG

Peel-away-Einführschleuse – Next Generation

Unsere neuen Split-Schleusen der Next Generation (NG) verfügen über einen neu gestalteten ergonomischen Sheath-Hub mit konischem Innenlumen. Dies erleichtert das Einführen von Elektroden und Kathetern und sorgt für ein komfortableres Arbeiten. Gleichzeitig behalten die Schleusen ihren bewährten geringen Außendurchmesser

und den atraumatischen Übergang vom Dilatator zur Schleuse bei. Sie lassen sich sehr leicht und gleichmäßig auseinanderpeelen und sind optimal geeignet für das Legen von Herzschrittmacher-Elektroden mittels Punktions-technik. Erhältlich als komplettes Einführbesteck oder als einzelne Schleuse mit Dilatator.

Präzise im Handling:


Ergonomischer Hub und sanftes Peelen für eine sichere Anwendung

Eigenschaften und Vorteile

- Atraumatische Peel-Away-Schleuse mit geringem Außendurchmesser und sanftem Übergang vom Dilatator zur Schleuse
- Ergonomischer Sheath-Hub mit konischem Innenlumen für komfortables Arbeiten und erleichtertes Einführen
- Leichtes Aufbrechen und gleichmäßiges Peelen
- Deutliche Größenkennzeichnung direkt am Schleusengriff
- Dilatator einfach fixiert durch 90°-Drehung

Varianten

- Größen: 5F – 9F
- Länge der Schleuse: 14 cm
- Länge des Dilatators: 18 cm
- Komplettes Einführbesteck oder Schleuse mit Dilatator einzeln

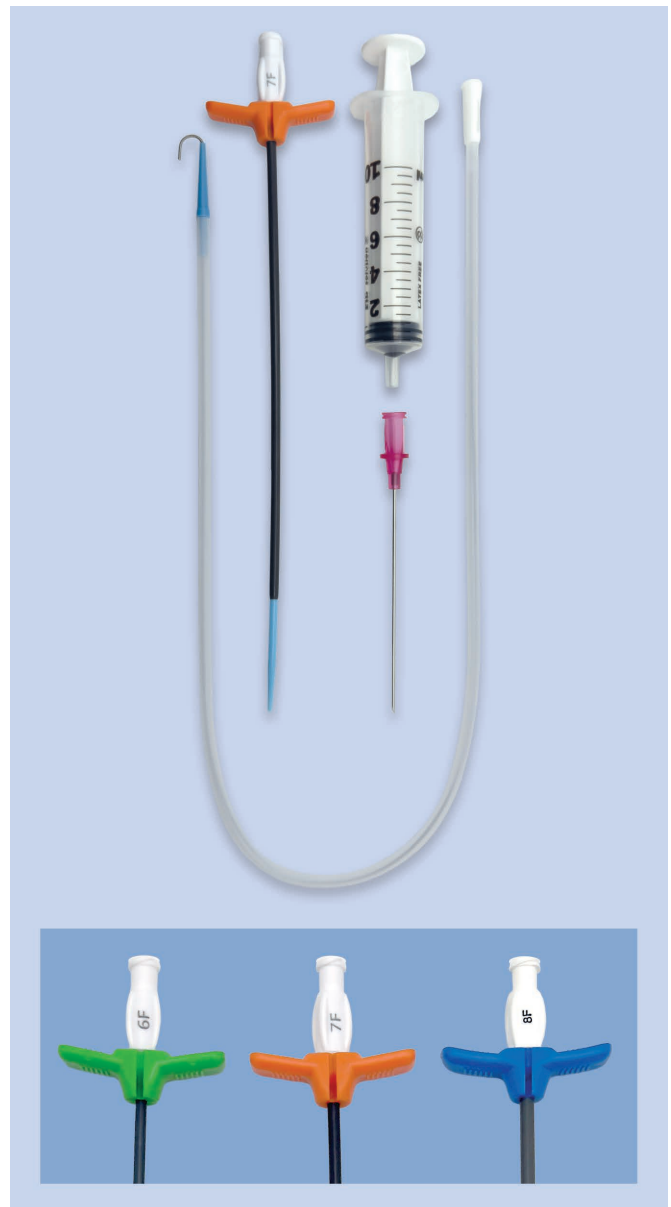

Bestellinformationen

Split-Schleuse NG

Artikel	Set	Größe	REF-Code	Bestellnr.
Split-Schleuse NG EB-5	Komplettes Einführbesteck	5F	F47505NG	33601105
Split-Schleuse NG EB-6	Komplettes Einführbesteck	6F	F47506NG	33601205
Split-Schleuse NG EB-7	Komplettes Einführbesteck	7F	F47507NG	33601305
Split-Schleuse NG EB-8	Komplettes Einführbesteck	8F	F47508NG	33601405
Split-Schleuse NG EB-9	Komplettes Einführbesteck	9F	F47509NG	33601505
Split-Schleuse NG SD-5	Schleuse + Dilatator	5F	F47505NG/S	33601115
Split-Schleuse NG SD-6	Schleuse + Dilatator	6F	F47506NG/S	33601215
Split-Schleuse NG SD-7	Schleuse + Dilatator	7F	F47507NG/S	33601315
Split-Schleuse NG SD-8	Schleuse + Dilatator	8F	F47508NG/S	33601415
Split-Schleuse NG SD-9	Schleuse + Dilatator	9F	F47509NG/S	33601515

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

einfach telefonisch, per Fax oder E-Mail:

Telefon: +49 241 997532-22 | Fax: +49 241 997532-99 | E-Mail: kundenservice@bispingmed.de

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte auch der Gebrauchsanweisung.

Ein Produkt unseres Partners

