

MYOPACE

Temporäre Myokard-Elektroden

MYOPACE Herzdrähte dienen der temporären elektrischen Stimulation des Herzens nach herzchirurgischen Eingriffen am Atrium und/oder Ventrikel. Die Elektroden werden direkt im Myokard fixiert und über eine Thoraxnadel transkutan ausgeleitet. Die sichere Fixierung und stabile Signalübertragung ermöglichen eine zuverlässige postoperative

Stimulation bei Herzrhythmusstörungen. MYOPACE Herzdrähte sind für unterschiedliche Stimulationskonzepte ausgelegt und eignen sich insbesondere für die Anwendung mit externen Herzschrittmachern PACE T10 (Einkammer) und PACE T20 (Zweikammer). Die mögliche Verweildauer beträgt bis zu 20 Tage post-OP.


Für jede Anwendung die passende Ausführung.

Anwendung & Nutzen

- Postoperative temporäre Stimulation nach Herz-OP
- Therapie postoperativer Herzrhythmusstörungen
- Zuverlässige Stimulation durch sichere Fixierung
- Verweildauer der Herzdrähte bis zu 20 Tage post-OP

Ausführung & Produktdetails

- Fixierung im Myokard über verschiedene Verankerungsformen (Straight, ZigZag, Tines, Hook, Loop)
- Uni- oder bipolare Stimulation für atriale, ventrikuläre, kombinierte atrial-ventrikuläre sowie biventrikuläre Anwendungen (CRT)
- Uni-, bi- und quadripolare Ausführungen
- Farbcodierung: Blau = Atrium, Weiß = Ventrikel
- Gerade oder gebogene Thoraxnadel (3/8 Kreis)
- Anschluss an externe Schrittmacher über 2-mm-Stecker (Myoconnector)
- Optional mit vorgestanzter Thoraxnadel (0,9 mm)
- Komplettes Sortiment verfügbar

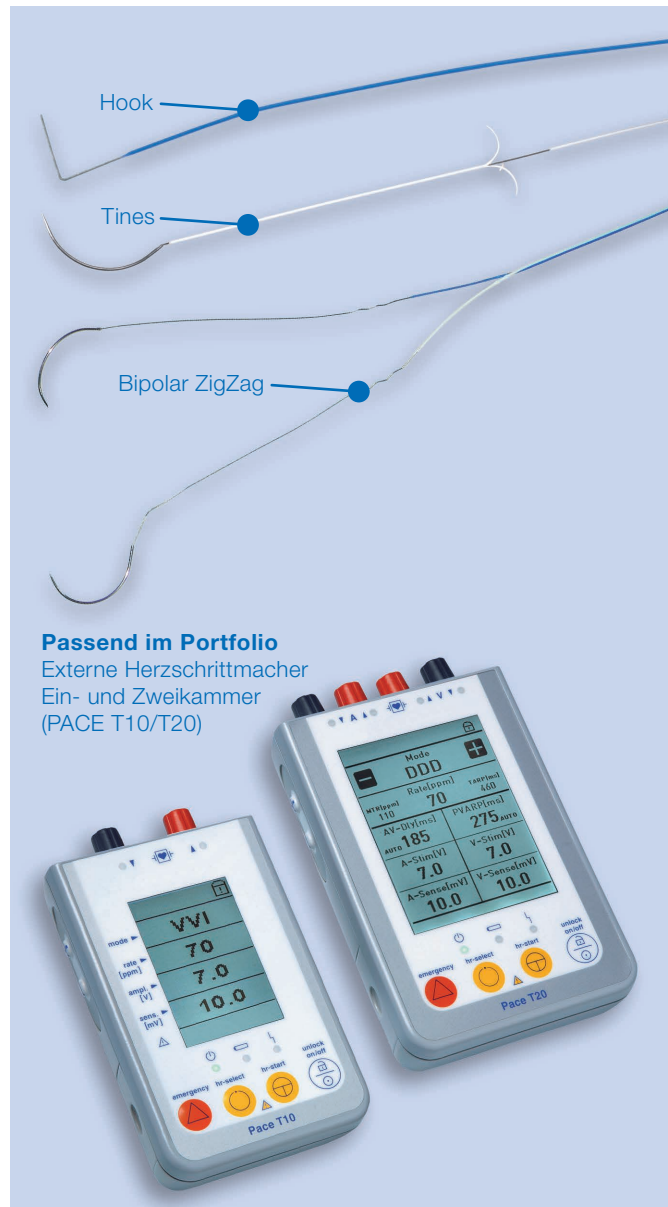

Passend im Portfolio
Externe Herzschrittmacher
Ein- und Zweikammer
(PACE T10/T20)

Bestellinformationen

Myopace Herzdrähte

Pole/Design ¹	Länge in cm ²	Thoraxnadel ³	Isolation ⁴	Myokard- Fixierung ⁵	Anschluss in mm ⁶	REF-Code	Bestellnr.
Für Erwachsene (Auszug aus unserem Portfolio)							
Unipolar	220	Gebogen	Blau	Straight	0,9	50220CT	33710104
Unipolar	220	Gebogen	Blau	ZigZag	2	50220CTZM	33710105
Bipolar	220	Gebogen	Blau	Hook	2	53220CBTVM	33711001
Bipolar In-Line	220	Gebogen	Blau	Straight	0,9	53220CBT	33710106
Bipolar In-Line	220	Gebogen	Blau	ZigZag	2	53220CBTZM	33710107
Bipolar In-Line	220	Gebogen	Blau	Tines	2	53220CBTINM	33710102
Bipolar In-Line	220	Gebogen	Weiß	Tines	2	53220CWTINM	33710115
Quadripolar	220	Gebogen	Blau/Weiß	ZigZag	2	55220CTZM	33710108
Quadripolar	220	Gebogen	Blau/Weiß	Tines + Hook	0,9	54220CTINV	33710181
Quadripolar In-Line	220	Gebogen	Blau/Weiß	Tines	2	55220CTINM	33710182
Für Kinder (Auszug aus unserem Portfolio)							
Unipolar	55	Gerade	Blau	Straight	0,9	50050P	33710500
Unipolar	55	Gebogen	Blau	Straight	0,9	50050CP	33710109
Im Portfolio: ■ Sämtliche Varianten auf Anfrage verfügbar ■ Externe Herzschrittmacher Ein- und Zweikammer (PACE T10/T20) ■ Temporäre intrakardiale Stimulationskatheter (SPIKE) ■ Zahlreiche Verlängerungskabel und Adapter für den Anschluss an externe Herzschrittmacher							
¹ Bipolare und quadripolare Herzdrähte – wahlweise als In-Line- oder Bifurkationsausführung							
² Für Erwachsene in 60 cm oder 220 cm, für Kinder in 55 cm oder 220 cm							
³ Thoraxnadel entweder gerade oder gebogen (3/8 Kreis)							
⁴ Isolation wahlweise in Blau oder Weiß							
⁵ Fixierungen: Straight, ZigZag, Tines, Hook, Loop; bei quadripolar auch Kombinationen, wie Tines/Loop oder Tines/Hook							
⁶ Entweder vorgestanzte Thoraxnadel für 0,9 mm Anschluss oder Adapter mit 2 mm Stecker (Myoconnector)							

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

einfach telefonisch, per Fax oder E-Mail:

Telefon: +49 241 997532-22 | Fax: +49 241 997532-99 | E-Mail: kundenservice@bispingmed.de

Ein Produkt unseres Partners



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte auch der Gebrauchsanweisung.